



大動脈閉塞バルーン ブロックバルーン

IABO Block Balloon

- 経皮挿入できます。
- カテーテルの留置位置ずれをおこしません。
- 低圧で血管閉塞ができます。

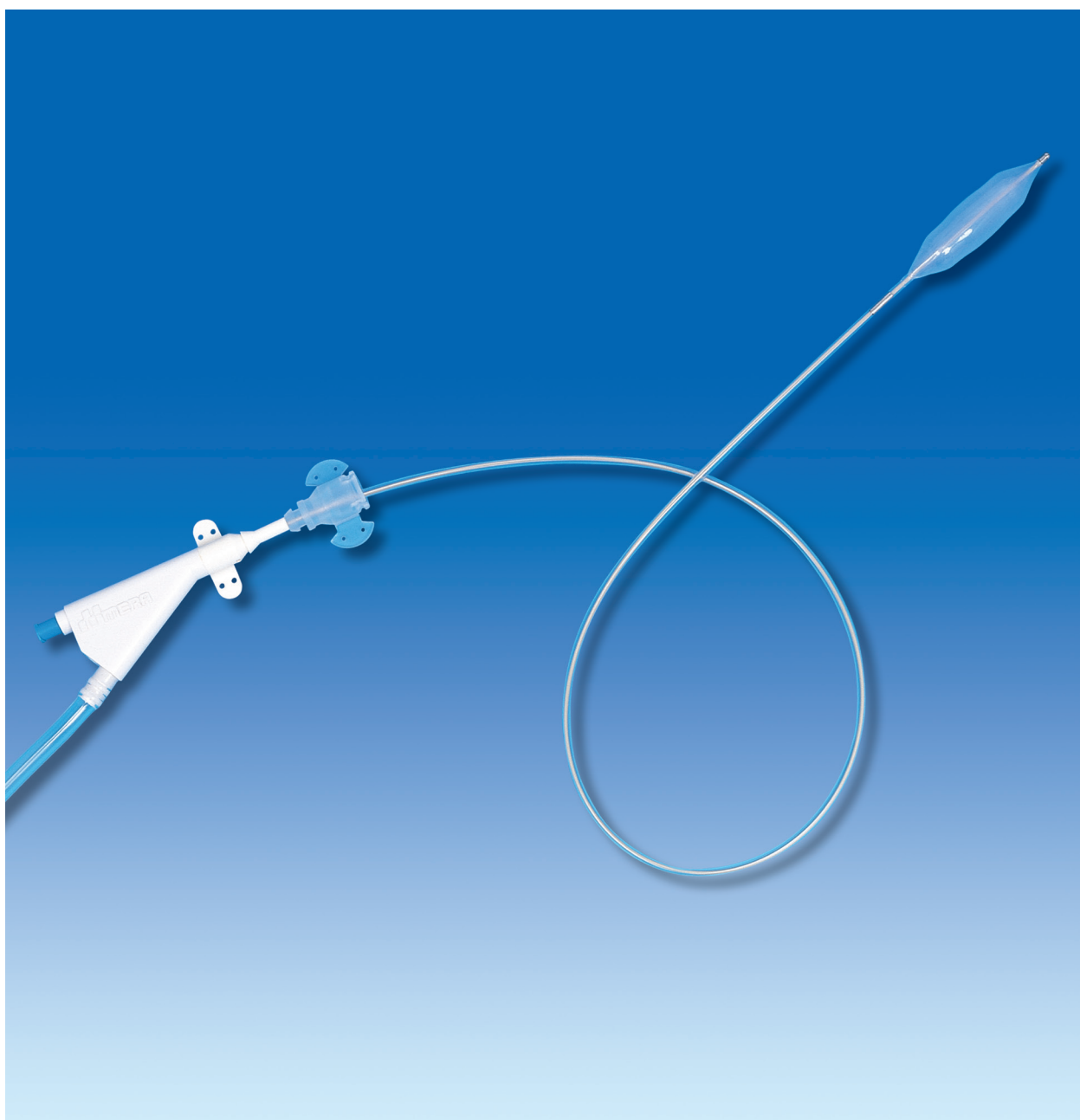


大動脈閉塞バルーン ブロックバルーン

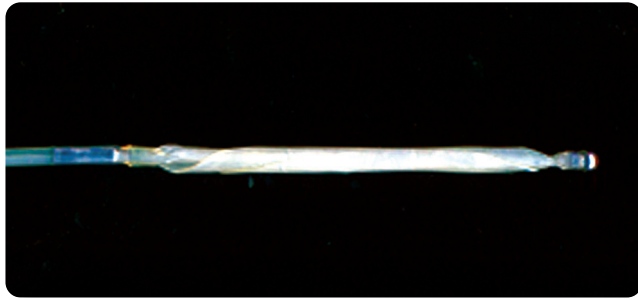


経皮挿入できます

付属の挿入セット(10Frシース)により経皮的に挿入できます。

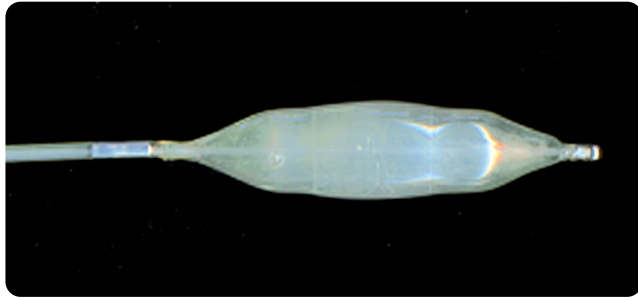

カテーテルの留置位置ずれをおこしません

スタイレット(ステンレス棒)の採用により、カテーテルの剛性を高め動脈圧下で閉塞・解除を反復してもカテーテルが押し戻されることがありません。

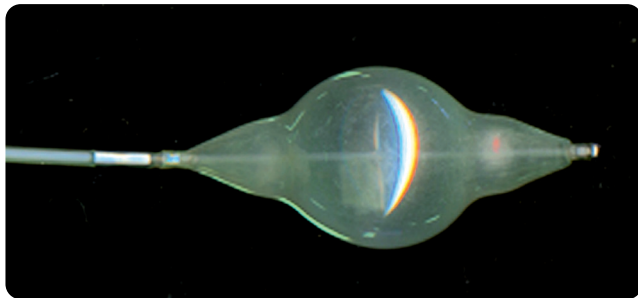

低圧で血管閉塞ができます

バルーンの形状を円筒型にして閉塞力を高め、更に低圧で弾性変形させることにより太い血管径まで閉塞することができます。

販 売 名		大動脈閉塞バルーン ブロックバルーン			
仕 様	①ブロックバルーン		②挿入キット		
	バ ル ー ン 長	65mm	シ ー ス 内 径	10.0F	
	有 効 血 管 径	20～30mm	ガイドワイヤー	太 さ	0.032inch
	カ テ ー テ ル サ イ ズ	9.0Fr		長 さ	145cm
	ル ー メ ン	ダブル		タ イ プ	J型
	挿 入 有 効 長	685mm	セ ル ジ ン ガ ー 針	18G	
	カ テ ー テ ル 材 質	医療用ポリウレタン	ダ イ レ ー タ ー (大)	10.0F	
			ダ イ レ ー タ ー (小)	8.0F	
		その他	三方活栓、メス シリンジ (20cc)		
使用有効期限	2年				
承認番号	21200BZZ00250000				
保 険 請 求 名	①ブロックバルーン:分 野 名		オクリュージョンカテーテル		
	機能区分		特殊型		
	②挿入キット :分 野 名		血管造影用シースイントロデューサーセット		
	機能区分		一般用		
参 考 文 献	鈍的腹部外傷の出血制御を目的とした専用大動脈遮断カテーテルの臨床応用 県立広島病院救命救急センター石原 晋ほか （日外傷会誌 12巻1号/1998）				

※仕様及び外観は機能向上のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

製造販売業者

MEIRA 泉工医科工業株式会社

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■問い合わせ先:本社商品企画:TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■営業所:札幌・函館・青森・盛岡・仙台・福島・つくば・埼玉・新潟・千葉・東京都・西東京・横浜・松本・名古屋・静岡・金沢・大阪・南大阪・京都・神戸・岡山・高松・広島・福岡・鹿児島



実際のお取り扱いの際には添付文書又は、取扱説明書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、外観及び仕様の一部は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。

●2010/12月/2000 ●不許複製 ●医療用具承認番号:21200BZZ002500000 ●T-2 ●D-33 ●BH-0103-01

www.mera.co.jp